



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	COLETA DE SWAB PARA SUSPEITA DE COVID-19	
EXECUTANTE: Enfermeiro (a)	COLETA DE EXAMES ESPECÍFICOS PARA CORONAVIRUS Deverão ser coletadas amostras para investigação nos seguintes casos: <ul style="list-style-type: none">• Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG);• Casos suspeitos, com OU sem febre, nestas categorias:<ul style="list-style-type: none">✓ Hospitalizados;✓ Trabalhadores da Saúde;✓ Profissionais das forças de segurança;✓ Pessoas acima de 60 anos, portadores das comorbidades (relacionadas na descrição do grupo de risco descrito abaixo);✓ Idosos em instituições de longa permanência.• Casos suspeitos COM febre aferida, nestas categorias:<ul style="list-style-type: none">✓ Pessoas entre 45 e 59 anos, portadores das comorbidades (relacionadas na descrição do grupo de risco descrito abaixo);✓ Grávidas em qualquer idade gestacional, puérperas até duas semanas após o parto (incluindo as que tiveram aborto ou perda fetal);✓ População indígena aldeada;✓ Privados de liberdade.	Emissão do POP: 13/05/2020 Próxima revisão: 13/06/2020

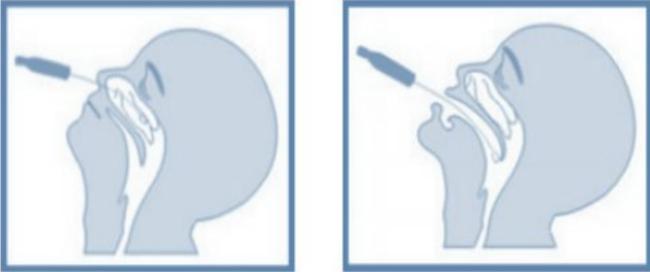


PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	GRUPO DE RISCO Idade > 60 anos, criança < 5 anos, população indígena aldeada, gestantes, puérperas, obesos (IMC > 40), diabéticos, doenças cardiovasculares, doenças pulmonares pré-existentes, doença cerebrovascular, doenças hematológicas, imunossupressão, câncer, uso de corticoides ou imunossupressores, pacientes com tuberculose, menores de 19 anos com uso prolongado de AAS, nefropatias.	
OBJETIVO: COLETAR A AMOSTRA DE SWAB DE NASO E OROFARINGE E ENVIO AO LABORATÓRIO	MATERIAL (PARAMENTAÇÃO DO COLETOR): <ul style="list-style-type: none">✓ Máscara modelo PFF2 (N95) ou equivalente✓ Avental descartável de mangas compridas✓ Luvas de procedimento✓ Óculos de proteção/viseira✓ Touca descartável	MATERIAL (DE COLETA): <ul style="list-style-type: none">✓ 2 unidades de Swab de Rayon✓ 1 tubo de ensaio com meio de transporte MEM



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS	<ul style="list-style-type: none">✓ Preencher ficha de notificação. Link: https://esusvs.saude.es.gov.br/auth/entrar✓ Pedido médico para receber material para coleta.✓ Deverão ser colhidos 2 swabs de Rayon para cada meio de transporte (MEM):<ul style="list-style-type: none">○ 1 nasofaringe direita e esquerdo○ 1 orofaringe✓ Introduzir o swab de Rayon na cavidade nasal (cerca de 5 cm), direcionando para cima (direção dos olhos), com uma angulação de 30 a 45° em relação ao lábio superior. Após a introdução, esfregar o swab com movimentos circulares delicados, pressionando-o contra a parede lateral do nariz (em direção à orelha do paciente).✓ Remover o swab de uma narina e introduzir na outra narina, realizando o mesmo procedimento. Após a coleta introduzi-lo imediatamente no meio de transporte MEM.✓ Colher o segundo swab na área posterior da faringe e tonsilas, evitando tocar na língua. Após a coleta, inserir o swab no mesmo frasco contendo o meio de transporte viral que foi introduzido a amostra nasofaríngea.✓ Rotular a amostra no tubo de transporte MEM com o nome completo do paciente, data de nascimento e número de prontuário ou CNS.✓ Enviar para laboratório o material coletado e identificado junto com a ficha de notificação e com a solicitação médica.	<p>Figura 2. Técnica para a coleta de swab combinado.</p>  <p>A – Swab nasal. B – Swab oral.</p> <p>Fonte: BRASIL, 2014</p>
	<ul style="list-style-type: none">✓ Antes de iniciar o procedimento é importante organizar todo o	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CUIDADOS ESPECIAIS	<p>material.</p> <ul style="list-style-type: none">✓ A coleta de Swab para paciente suspeito de COVID-19 só deverá ser realizada quando o paciente estiver em quarto privativo para isolamento respiratório/contato.✓ Após o procedimento, bloquear a sala para limpeza das superfícies pela equipe de higienização.✓ O material pode ser armazenado até o seu processamento no laboratório de referência por até 72 horas após a coleta. Deve ser mantido resfriado de 4° a 8° graus Celsius.✓ Seu transporte deve ser realizado em recipiente apropriado (caixas térmicas de material impermeável e higienizável).✓ Deverá ser sinalizado na parte externa do recipiente, o código padronizado UN 3373 (substâncias infecciosas categoria B).	
REFERÊNCIA	<ul style="list-style-type: none">✓ CEARÁ, Plano estadual de contingência para resposta às emergências em saúde pública Coronavírus, 2020.✓ Ministério da saúde. Guia de Vigilância Epidemiológica. 03 de abril de 2020. Disponível em: <https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/06/GuiaDeVigiEp-final.pdf>✓ NOTA TÉCNICA COVID-19 N° 29/2020 – GEVS/SESA/ES	

ELABORAÇÃO: Isabela Schunk Souza Bullerjham.
ANÁLISE: Dalciana Vervloet (Gerente de Enfermagem)
APROVAÇÃO: Raphael Rocha (Diretor Clínico)

Av. Germano Stabenow s/n°, Centro – Laranja da Terra - ES – CEP 29.615-000.

Telefone (27) 3736-1323 – e-mail: saude@laranjadaterra.es.gov.br

CNPJ nº 14.790.251/0001-21 www.laranjadaterra.es.gov.br